


Sacche per drenaggio a circuito chiuso Excellence



- Elevata qualità a prezzo contenuto
- Dispositivi latex free
- Disponibile anche nella versione Plus

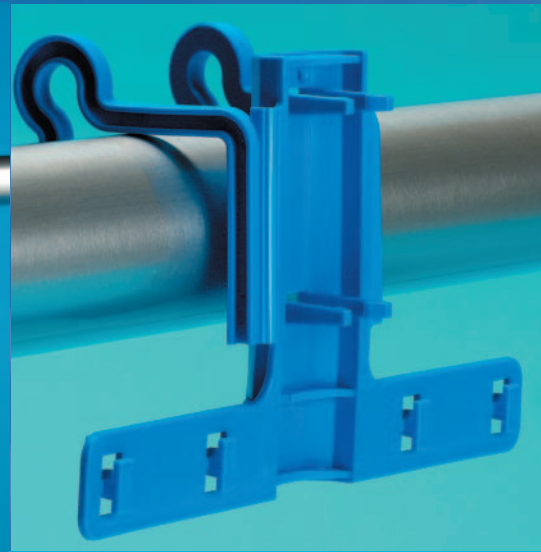

Sacche per drenaggio a circuito chiuso Excellence 2000 - Excellence 2000 Plus

La progettazione accurata dei particolari e la scelta di materiali di elevata qualità conferiscono ai dispositivi alta praticità e affidabilità a costi contenuti.

La linea EXCELLENCE si sviluppa su due tipologie di sacche con capacità 2000ml:

- EXCELLENCE 2000
- EXCELLENCE 2000 PLUS

Entrambi i prodotti offrono un sistema di drenaggio a circuito chiuso che risulta un ottimo strumento per la prevenzione delle infezioni del tratto urinario.

Excellence 2000

La sacca, trasparente e con scala graduata approssimativa, possiede valvola antireflusso che evita il ritorno del liquido al paziente, filtro antibatterico di compensazione della pressione interna e rubinetto di scarico con relativo ricovero estremamente funzionale.

Il dispositivo è dotato di :

- Cono catetere scalinato rigido ad attacco universale con punto prelievo e capsula protettiva che consente un fissaggio sicuro al catetere urologico.
- Piastrina stringitubo che permette di effettuare ginnastica vescicale e prelievi di urina.

Il tubo di drenaggio ad ampio lume e a superficie interna liscia

garantisce un flusso costante evitando ostruzioni al passaggio del liquido.

EXCELLENCE 2000 non possiede la maniglia di sostegno che può comunque essere acquistata separatamente.

Le sacche sono disponibili nella conformazione standard in con-

EXCELLENCE 2000

CODICE	MODELLO	LUNGHEZZA TUBO	CONFEZIONE
H90321E	Excellence 2000-90	90 cm	50 pz.
H90331E	Excellence 2000-110	110 cm	50 pz.
H90341E	Excellence 2000-130	130 cm	50 pz.

Excellence 2000 Plus

La sacca con scala graduata approssimativa di facile interpretazione possiede valvola antireflusso che evita il ritorno del liquido al paziente, filtro antibatterico di compensazione della pressione interna e rubinetto di scarico con relativo ricovero estremamente funzionale.

La lettura del volume di liquido drenato risulta più chiara grazie allo sfondo bianco di cui è costituita la sacca.

Il dispositivo è dotato di :

- Cono catetere scalinato rigido ad attacco universale con punto prelievo e capsula protettiva che consente un fissaggio sicuro al catetere urologico.
- Piastrina stringitubo che permette di effettuare ginnastica vescicale e prelievi di urina.
- Pinza lenzuolo per posizionare correttamente il tubo di drenaggio in modo da consentire

uno scarico continuo e regolare

- Vaschetta di Pasteur che evita la risalita batterica creando una discontinuità nello scarico del liquido drenato.
- Maniglia di nuova concezione pratica e maneggevole che assicura stabilità e sicurezza di fissaggio su qualunque tipo di sostegno grazie al doppio gan- cio adattabile.

EXCELLENCE 2000

CODICE	MODELLO	LUNGHEZZA TUBO	CONFEZIONE
H90391E	Excellence 2000-90 Plus	90 cm	40 pz.
H90401E	Excellence 2000-110 Plus	110 cm	40 pz.
H90411E	Excellence 2000-130 Plus	130 cm	40 pz.