



## Tubi in PVC per aspirazione chirurgica

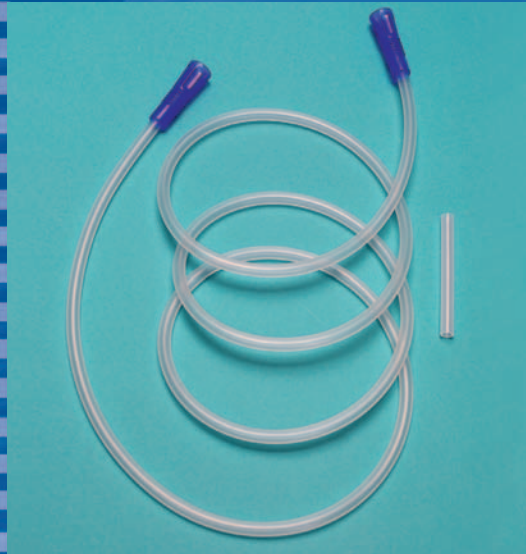

- Tubo con ampio lume
- Leggero e maneggevole
- Indefornabile durante l'aspirazione
- Raccordi di connessione standard

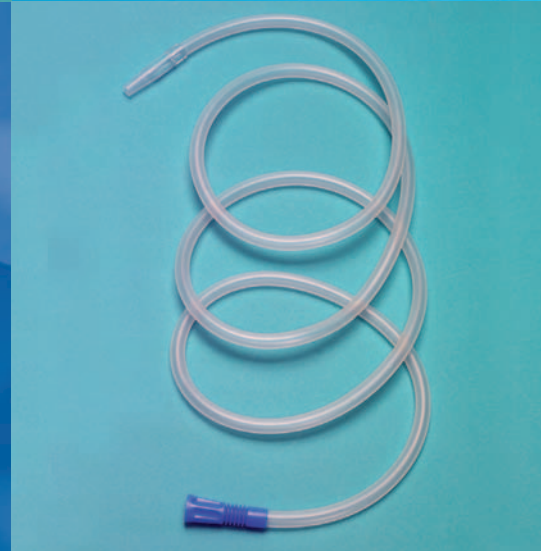

# Tubi per aspirazione chirurgica

I tubi di aspirazione possiedono elevata morbidezza e sono dotati di ampio lume per garantire un ottimo passaggio dell'aspirato.

Il tubo è stato progettato in modo da evitare restringimenti del lume durante le fasi di aspirazione.

Internamente liscio e privo di asperità per facilitare il passaggio dell'aspirato.

Esternamente la superficie satinata evita attriti indesiderati

durante l'utilizzo.

Il tubo di aspirazione è disponibile nelle versioni:

- Femmina/ Femmina (questa versione è dotata di raccordo rigido Maschio/Maschio)
- Femmina/ Maschio
- Femmina/Vacutip

1) Il raccordo "Femmina" possiede una geometria a soffietto che permette una facile manovrabilità e piegatura oltre

i 90° senza ridurre il lume di passaggio.

2) Il raccordo "Maschio" grazie alla sua rigidità consente un facile e sicuro inserimento su qualsiasi tipo di raccordo "Femmina" morbido.

3) Il "Vacutip" consente la regolazione dell'aspirazione.

Tutti i raccordi di connessione garantiscono una perfetta tenuta.

Il dispositivo è fornito in doppia



## TUBI PER ASPIRAZIONE FEMMINA/FEMMINA CH25

CODICE	LUNGHEZZA	CONFEZIONE
H91510E	100 cm	50 pz.
H91515E	150 cm	50 pz.
H91518E	180 cm	50 pz.
H91520E	200 cm	50 pz.
H91522E	220 cm	50 pz.
H91525E	250 cm	50 pz.
H91527E	270 cm	40 pz.
H91530E	300 cm	40 pz.
H91535E	350 cm	30 pz.
H91537E	370 cm	30 pz.
H91540E	400 cm	30 pz.

## TUBI PER ASPIRAZIONE FEMMINA/FEMMINA CH30

CODICE	LUNGHEZZA	CONFEZIONE
H91380E	100 cm	50 pz.
H91385E	150 cm	50 pz.
H91388E	180 cm	50 pz.
H91390E	200 cm	50 pz.
H91392E	220 cm	50 pz.
H91395E	250 cm	40 pz.
H91397E	270 cm	40 pz.
H91400E	300 cm	40 pz.
H91405E	350 cm	30 pz.
H91407E	370 cm	30 pz.
H91410E	400 cm	30 pz.

## TUBI PER ASPIRAZIONE FEMMINA/MASCHIO CH25

CODICE	LUNGHEZZA	CONFEZIONE
H91270E	200 cm	50 pz.
H91280E	300 cm	40 pz.

## TUBI PER ASPIRAZIONE FEMMINA/MASCHIO CH30

CODICE	LUNGHEZZA	CONFEZIONE
H91330E	200 cm	50 pz.
H91340E	300 cm	40 pz.

## TUBI PER ASPIRAZIONE FEMMINA/VACUTIP CH25

CODICE	LUNGHEZZA	CONFEZIONE
H91770E	200 cm	50 pz.
H91780E	300 cm	40 pz.

## TUBI PER ASPIRAZIONE FEMMINA/VACUTIP CH30

CODICE	LUNGHEZZA	CONFEZIONE
H91810E	200 cm	50 pz.
H91820E	300 cm	40 pz.

## Tubo in PVC non sterile in bobina

Il tubo in bobina permette agli operatori una grande versatilità

ed economicità nell'assemblare circuiti personalizzati.

La confezione dispenser protegge opportunamente la

### TUBO IN PVC NON STERILE IN BOBINA

CODICE	DIAMETRO TUBO	LUNGHEZZA BOBINA	CONFEZIONE
H93005N	8 X 12 mm	50 metri	2 bobine
H93006N	10 X 14 mm	40 metri	2 bobine

A richiesta Bioservice può fornire schede tecniche dettagliate.

BIOSERVICE S.p.A.  
via R. Piva 1/a  
46025 Poggio Rusco (MN) Italy

Tel. 0386-522111 Fax 0386-522100  
e-mail: bioservice@bioservice-spa.com  
www.bioservice-spa.com